


ANLAN

DEPILATOR

Instrukcja obsługi

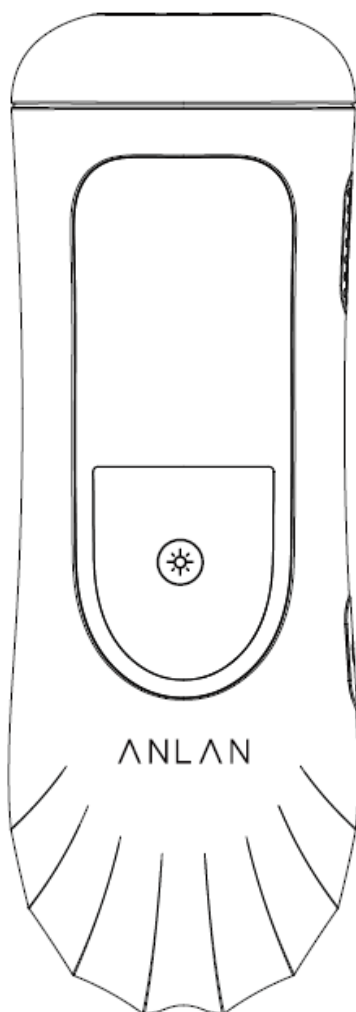

- **Produkt nie jest urządzeniem medycznym, nie może być używany do diagnozy ani zabiegów. Produkt jest tylko do użytku domowego.**

Dziękujemy za zakup produktu ANLAN. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Ostrzeżenia

- Nie należy samemu naprawiać ani rozkręcać urządzenia. Należy skonsultować się z serwisem.
- Należy trzymać urządzenie z dala od ognia oraz urządzeń grzejących.
- Nie należy opuszczać ani uderzać urządzeniem.
- Nie należy kłaść urządzenia w wodzie ani zostawiać go w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Urządzenie powinno być używane tylko przez osoby powyżej 18 roku życia.
- Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Przed każdym użyciem, sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli posiada uszkodzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, zlewów, pryszniców lub innych zbiorników wodnych.
- Nie należy kierować lasera w kierunku oczu.
- Nie należy wkładać ciał obcych do wejść wentylacyjnych urządzenia.
- Upewnij się przed użyciem, czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem urządzenia, zapoznaj się z instrukcją i dokładnie ją przestrzegaj. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranień. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Zawsze dołączaj instrukcję do zestawu, jeśli przekazujesz komuś urządzenie.

- Nie należy używać urządzenia ANLAN podczas ciąży oraz karmienia piersią.
- Jeśli skóra znacznie się czerwieni lub swędzi po użyciu, natychmiast przestań korzystać z urządzenia.
- Przetestuj urządzenie na małym obszarze skóry 48 godzin przed pierwszym korzystaniem z urządzenia.
- Nie należy bezpośrednio patrzeć na światło wydobywające się z urządzenia. Gładki obszar kartdridża powinien całkowicie stykać się ze skórą.
- Nigdy nie należy kierować pulsujące światło w losowym kierunku.
- Skonsultuj się z tabelą dotyczącą skóry oraz włosów, aby dostosować natężenie światła do swojej skóry (literą „X” oznaczono światło nieodpowiednie dla twojej skóry).
- Urządzenie najlepiej działa z włosami ciemnymi lub takimi, które posiadają więcej melaniny. Brązowe i jasne włosy również mogą zostać usunięte przez urządzenie, lecz dla uzyskania najlepszego efektu konieczne może być przeprowadzenie kilku sesji.
- Urządzenie ANLAN może doprowadzić do tymczasowej pigmentacji.
- Nie należy samemu podejmować się prób naprawy urządzenia ANLAN IPL. Po rozkręceniu urządzenia twoje oczy lub skóra mogą się zetknąć z niebezpiecznym, pulsującym światłem. Może on doprowadzić do stałego uszkodzenia wzroku.

Zakazane obszary

Nie należy używać urządzenia ANLAN w następujących miejscach:


- Na membranach nosa oraz uszu. W pobliżu implantów (np. rozruszników serca), pompach insulinowych itp.
- Na twarzy powyżej lica, wokół oczu, na brwiach, powiekach. Może to doprowadzić do uszkodzenia oczu.
- Na sutkach, genitaliach lub w pobliżu odbytu.
- Na miejscach piercingu, w pobliżu metalowych obiektów (np. biżuterii lub kolczyków).
- Na tatuażach lub miejscach gdzie znajduje się stały makijaż.
- Na brązowych lub czarnych punktach (np. dużych piegach, pęcherzach, brodawkach). Nie należy również używać w miejscach gdzie znajdują się rany lub infekcje.
- Na uszkodzonych lub popękanych obszarach skóry.
- W miejscach których chcesz, by znajdowały się włosy.



Nie należy używać urządzenia ANLAN na opalonej skórze lub takiej, która przed chwilą miała intensywny kontakt ze słońcem

Nie należy korzystać z urządzenia ANLAN, jeśli skóra była pod wpływem, intensywnego światła słonecznego przez 15+ minut. Może to doprowadzić do poparzeń, uszkodzenia skóry lub zabarwień. Nie należy również odsłaniać skórę na światło słoneczne dłużej niż 15 minut 48 godzin po korzystaniu z urządzenia ANLAN. Zaleca się używać kremu przeciwsłonecznego SPF 30+.

Nazwy i funkcje każdego elementu

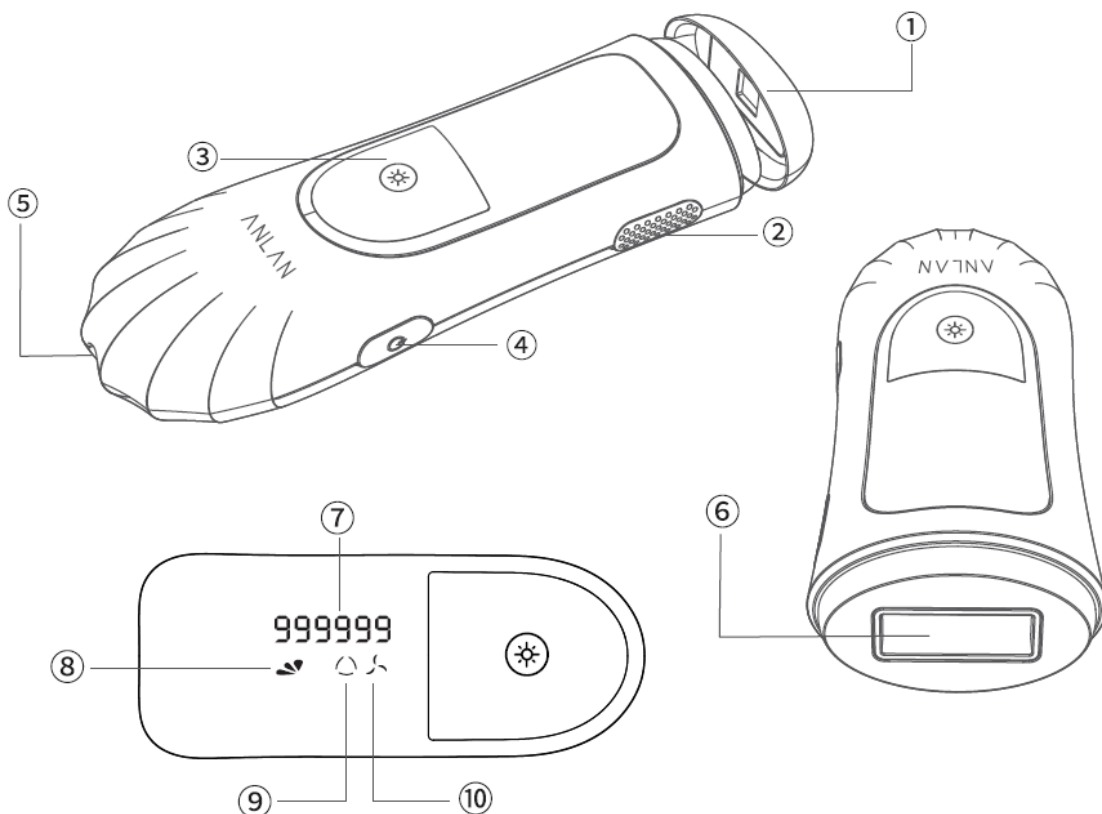


1. Wymienna magnetyczna końcówka (po założeniu, obszar naświetlania stanie się mniejszy)
 2. Termowentylator
 3. Przycisk flash
 4. Przycisk zasilania/przycisk poziomu zasilania
 5. Port ładowania
 6. Port naświetlania
 7. Pozostała liczba użyć (miga po wykryciu skóry)
 8. Wyświetlanie poziomu (1~5)
 9. Stały tryb migania
 10. Wentylator chłodzący
- Aby zredukować temperaturę po użyciu, wentylator działa przez 10 sekund po wyłączeniu urządzenia.

Zakazane obszary


Nazwa	Usuwanie włosów
Tryb	JD-TM005
Maks. liczba pulsów światła	999999
Materiał	ABS
Obszar działania	3.0 ² (po założeniu magnetycznej końcówki: 1.0cm ²)
Światło	Silne pulsujące światło IPL
Długość fali	510-1200nm
Moc promieniowania	6-12J
Tryby mocy do wyboru	5
Adapter AC	100-240V
Wymiary	170*60*40mm
Waga	Ok. 200g (sam główny element)
Moc	36W
Zasilanie	DC12V  3A
Automatyczne wyłączenie	ok. 3 minut

- Liczba użyć może być mniejsza niż 999999, jako że urządzenie jest fabrycznie testowane.

Informacje o urządzeniu

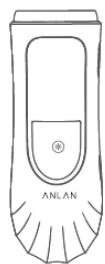


Depilator x1

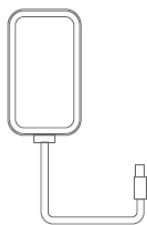


Adapter AC x1



Okulary x1

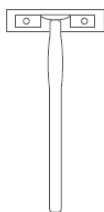


Skrobak x1

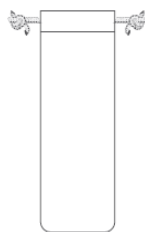

Worek
flanelowy x1



Magnetyczna
końcówka x1

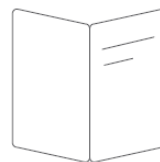

Instrukcja x1

Przygotowania przed użyciem

1. Próby

Przed pierwszym użyciem, lub gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, upewnij się czy urządzenie nie sprawia problemów na skórze. Używając trybu 1, naświetl mały obszar na skórze. Jeśli na skórze nie pojawiają się żadne nietypowe zmiany w ciągu 24 godzin - możesz korzystać z urządzenia.

Jeśli na skórze pojawiły się poważne zmiany, przerwij korzystanie z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.

2. Tryb pielęgnacji (2 tryby)

Możesz wybrać tryb ciągłego migania lub standardowego migania w zależności od obszaru skóry, który chcesz oczyścić.

- Tryb ciągłego migania: pozwala szybko oczyścić szeroki obszar (stopy, ramiona, klatka piersiowa, plecy itp.)
- Tryb standardowego migania: przeznaczony do czułych obszarów skóry, małych obszarów lub ciężko dostępnych miejsc (kolana, kostki, linie bikini, pachy, twarz itp.)

Przed użyciem, zgól włosy i wyczyść skórę. Noś gogle ochronne podczas noszenia.

Pielęgnacja twarzy

Przed użyciem

- Przetestuj urządzenie na skórze, przed pierwszym użyciem.
- Dokładnie ogól włosy na obszarze, który ma być oczyszczony. Upewnij się, że na skórze nie ma makijażu lub kremu.

Pielęgnacja twarzy, policzek oraz body (tryb standardowy)

Przyłóż obszar świecący do skóry i upewnij się że urządzenie wykrywa skórę (wyświetli się pozostała liczba użyc). Przed naciśnięciem przycisku migania, zamknij oczy i odwróć je od obszaru świecącego. Nie pozwól by światło uderzyło w oczy. Nie należy naświetlać tego samego obszaru skóry dwukrotnie.

Pielęgnacja włosów oraz górnej wargi

- Nie należy dotykać urządzeniem ust oraz nosa. Ostrożnie używaj urządzenia w pobliżu wargi oraz pod nosem.
- Nie używaj urządzenia na ustach, na których znajduje się stały makijaż.

Pieczenie na podbródku



Owłosienie na podbródku może być gęste i skóra może być podrażniona po użyciu urządzenia. Podrażnienie powinno zniknąć po 24 godzinach.

Uwaga


- Jeśli twoja się zaczerwieni oraz pojawi się swąd, ochłódź ją za pomocą chłodnej oraz wilgotnego ręcznika.
- Jeśli twoja skóra jest przebarwiona (jest jaśniejsza lub ciemniejsza), natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skonsultuj się z doktorem.

Używanie depilatora

- Przed użyciem, upewnij się że obszar naświetlania nie jest zabrudzony i nie posiada uszkodzeń. Wyczyść obszar w razie potrzeb.

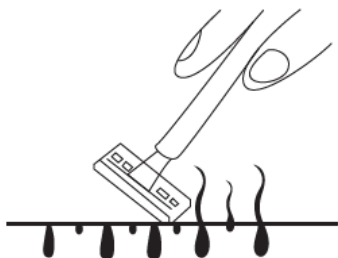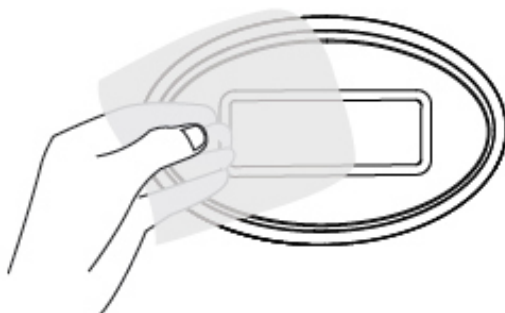

1. Przed pierwszym użyciem, przetestuj urządzenie. Jeśli włosy na skórze są dłuższe niż 5mm - zgól je.

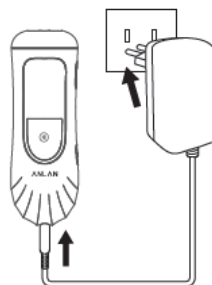

2. Podłącz adapter do wtyczki na urządzeniu, a drugi koniec do gniazdka.


3. Noś okulary ochronne podczas użytkowania.



4. (1) Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aby włączyć zasilania. Domyślny tryb podczas startu to poziom 1.

(2) Naciśnij raz przycisk zasilania aby zmienić poziom (1-> 2 -> 3 -> 4 -> 5).


(3) Przytrzymaj przycisk naświetlania aby przełączać się pomiędzy ręcznym trybem naświetlania i automatycznym.

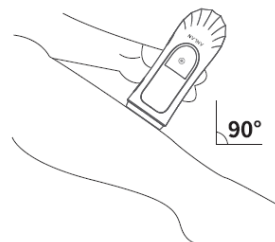

5. Przyłóż obszar naświetlania pionowo do skóry.

Potwierdź, że urządzenie wykryło skórę, wybierz stały tryb naświetlania lub standardowy i powoli przystąp do usuwania włosów za pomocą depilatora.

6. Po zakończeniu depilacji, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ dostosowywania aby wyłączyć zasilanie. Odłącz urządzenie od prądu. W celu ochłodzenia, wentylator będzie działać 10 sekund nawet po wyłączeniu urządzenia.

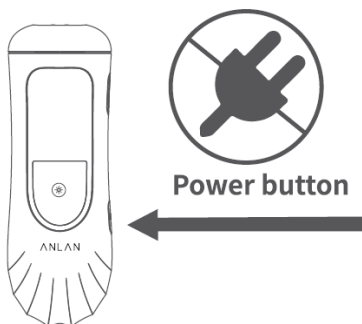

- Gdy zasilanie jest włączone, lecz urządzenie nie jest używane przez 3 minuty, urządzenie wyłączy się automatycznie.


Korzystanie z harmonogramu

Nie wszystkie cykle rośnięcia włosów są takie same i należy usuwać włosy w zależności od cykli. Zalecane jest używanie depilatora przez 8 tygodni, aby w pełni usunąć włosy z wybranego obszaru.

Rozpoczęcie użytkowania	Dwa razy w tygodniu (4-12 tygodni)
Gdy włosy są już słabo widoczne	Korzystać z depilatora, gdy znajdzie taka potrzeba (np. Raz na miesiąc)

- Zaleca się korzystać z urządzenia dwa razy w tygodniu przez 4 do 12 tygodni. Gdy włosy są już słabo dostrzegalne, możesz korzystać z urządzenia raz na 3 tygodnie/miesiąc.

Zalecany czas użytkowania w zależności od obszaru

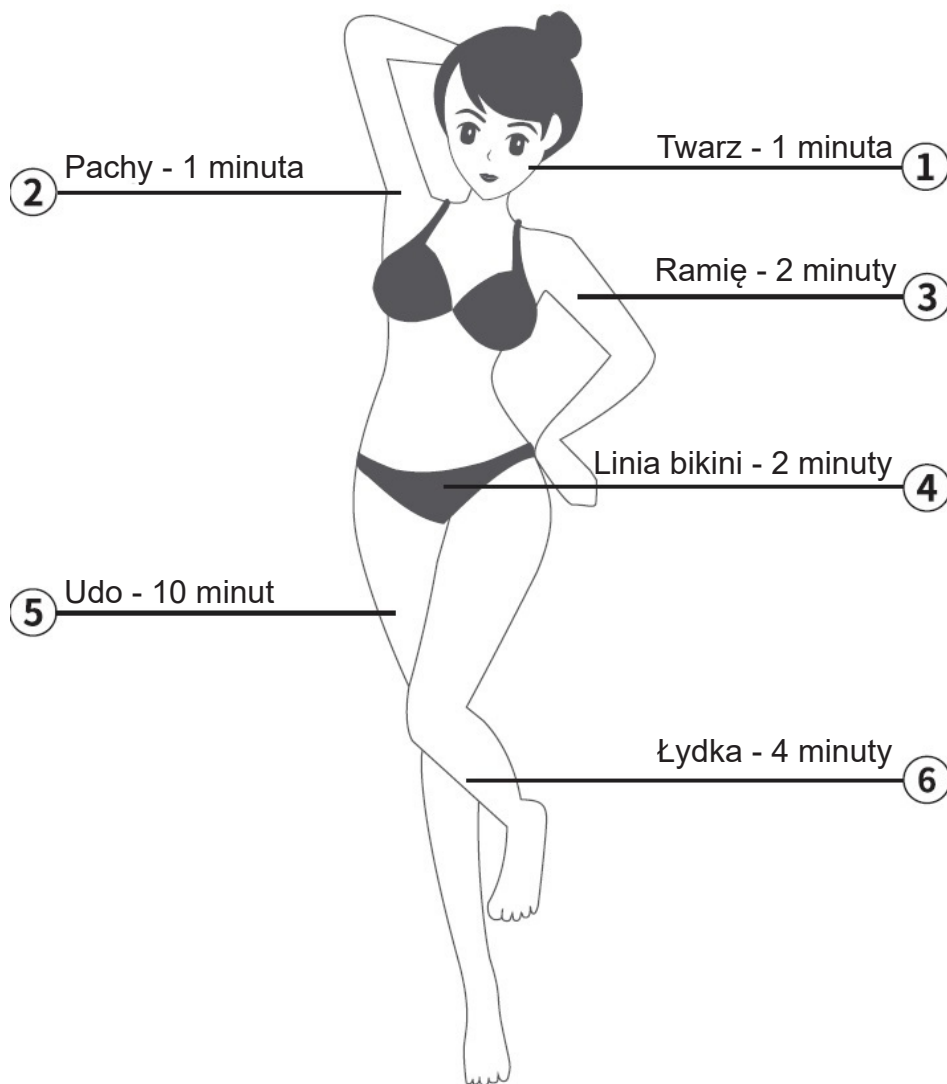

Powyższe czasy są jedynie standardowymi. Należy dostosować czas użytkowania do własnej skóry oraz potrzeb.

Magnetyczna główka z małym obszarem naświetlania: używana jest na wrażliwych oraz małych miejscach na ciele - twarzy, ustach, brodzie oraz na linii bikini.

Duża główka z dużym obszarem naświetlania: używana na ramionach, pachach, udach oraz goleni.

Po użyciu

- Odłącz kabel zasilania od gniazdka.
- Obszar naświetlania jest nagrzany po użytkowaniu. Odczekaj 5 minut aż ochłodnie.
- Ochłódź depilowaną skórę kremem nawilżającym (zalecane by miał zawartość witaminy C).
- Po wyjściu na zewnątrz, nałóż krem przeciwsłoneczny (SPF3++ lub silniejszy).
- W przeciągu 24 godzin od czasu depilacji, unikaj używania kremów, które, mogłyby obciążać skórę, perfum, dezodorantów.
- Ostrożnie przetrzyj główny element oraz obszar naświetlania za pomocą mokrej ścierki (która nie ocieka wodą).

! Nie należy przemywać urządzenia. Nie jest wodoodporne.

! Nie należy przemywać urządzenia benzyną lub rozcieńczaczem.

Aby utrzymać urządzenie w czystości, zaleca się go trzymać w opakowaniu, aby nie pokrył się kurzem.

Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu, w wysokich temperaturach oraz wilgoci. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.

Możliwe symptomy

Podczas użytkowania, skóra może się zaczerwienić i możesz odczuwać lekki swąd. Symptomy te znikają w przeciągu 24 godzin.

Bardzo rzadko, symptomy te mogą się pojawić po 72 godzinach od czasu użytkowania. Jeśli pojawią się poważne zmiany na skórze, przerwij użytkowanie i skonsultuj się z doktorem.

Objawy	Rozwiązanie
Mrowienie podczas użytkowania	Zwyczajne objawy po użyciu
Ból podczas użytkowania oraz po zakończeniu	Przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem
Skóra zaczerwieniona po użyciu	Zwyczajne objawy po użyciu. Zaczerwienienie powinno zniknąć w przeciągu 24 godzin
Skóra nadal jest zaczerwieniona, mimo iż od użycia minęło 24-48 godzin	Przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem
Bardzo rzadkie przypadki	
Obszary wokół włosów są zaczerwienione oraz opuchnięte	Objawy powinny ustąpić w przeciągu 3 dni
Zaczerwienione oraz opuchnięte obszary wokół włosów nie znikają po kilku dni	Przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem
Skóra zabarwiona po użyciu	Przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem
Włosy na depilowanym obszarze powróciły w większej ilości	Jeśli włosy stale powracają po depilacji i to w większej ilości, przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem

Często zadawane pytania

P: Dlaczego efekt depilacji nie jest odczuwalny?

O: Cykl rośnięcia włosów jest różny i wynosi od 18 do 24 miesięcy. Aby uzyskać lepsze efekty, zaleca się przeprowadzać depilację dwa razy w tygodniu przez 4-12 tygodni.

P: Czy konieczne jest ręczne golenie włosów za każdym razem, gdy chcę depilować wybrany obszary?

O: Golenie nie jest konieczne za każdym razem. Konieczne jest zgolenie włosów tylko przed pierwszym użyciem lub gdy włosy urosną do 5mm +.

P: Dlaczego natychmiast po naświetleniu, niechciane włosy nie znikają i zmiany nie są odczuwalne?

O: Produkt korzysta z technologii IPL, aby bezboleśnie i stale usunąć włosy. Włosy nie zostaną usunięte na stałe, jeśli urządzenie nie jest używane regularnie. Urządzenie na początku spowalnia rośnięcie włosów, a po regularnym stosowaniu - stale go hamuje.

P: Który poziom naświetlania przynosi najlepsze efekty?

O: Tryb naświetlania powinien zostać dobrany do skóry oraz osoby (im ciemniejsza jest skóra, tym mniejsze będzie naświetlanie). Zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj. Im wyższy jest poziom, tym mocniejszy będzie efekt i krótszy cykl depilacji. Przetestuj urządzenie na jednym obszarze na skórze przed dokonaniem pełnej depilacji.

P: Czy naświetlanie jest bolesne?

O: Może być odczuwany lekki ból podczas depilacji, ze względu na generowane ciepło oraz to, jak pigmenty melaniny reagują na światło. Odczuwalny jest również zależny od typu skóry użytkownika. Dopasuj poziom naświetlania do skóry.

Typ włosów i skóry	1	2	3	4	5	6
Czarne 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Ciemne-brązowe 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Brązowe 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Ciemny blond 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Blond 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Jasny blond 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Czerwone 	Moc 1-5		Moc 1-4	Moc 1-3		×
Siwe / białe 	×		×	×		×

※ Należy samemu dobrać poziom mocy urządzenia po przetestowaniu i sprawdzeniu komfortu

※ Im wyższy poziom mocy, tym lepszy jest efekt depilacji